

KULLANMA
TALİMATLARI

A-dec 511

DENTAL KOLTUK



 a dec®

Copyright

© 2023 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.

A-dec Inc., pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk örtük garantileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyal ile ilgili herhangi bir garantide bulunmaz. A-dec Inc., burada yer alan hatalardan veya bu materyalin kurulmasından, performansından veya kullanımından doğan sonuçsal veya diğer hasarlardan ötürü sorumlu olmayacaktır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belge ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu sorunları bize yazılı olarak bildirin. A-dec Inc. bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez.

Bu belgenin hiçbir bölümü, A-dec Inc.'nin önceden yazılı izni olmadan fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi depolama veya tutma sistemi dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya aktarılamaz.

Ticari Markalar ve Ek Fikri Mülkiyet Hakları

A-dec, A-dec logosu, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius ve reliablecreativesolutions, A-dec Inc.'nin ticari markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescillidir. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 ve EasyFlex de A-dec Inc.'ye ait ticari markalardır. Bu belgede yer alan ticari markaların veya ticari adların hiçbirisi, ticari marka sahibinin açık ve yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya değiştirilemez.

Bazı dokunmatik panel sembolleri ve simgeleri A-dec Inc. mülkiyetindedir. Bu sembollerin veya simgelerin A-dec Inc.'nin açık ve yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen kullanılması kesinlikle yasaktır.

Düzenleyici Bilgiler ve Garanti

Gerekli düzenleyici bilgiler ve A-dec garantisi için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan *Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti* belgesine (p/n 86.0221.15) bakın.


Ürün Servisi

Yerel yetkili A-dec bayinizden ürün servisi için hizmet alabilirsiniz. Servis bilgileri veya yetkili bayi bulmak için www.a-dec.com adresini ziyaret edin veya ABD ve Kanada'da 1.800.547.1883 numaralı hattın, dünya genelinde ise 1.503.538.7478 numaralı hattın A-dec ile iletişim kurun.

Bu Belgede Yer Alan Ürün Modelleri ve Versiyonları

Model	Versiyon	Açıklama
511	B	Dental Koltuk

İçerik Haritası

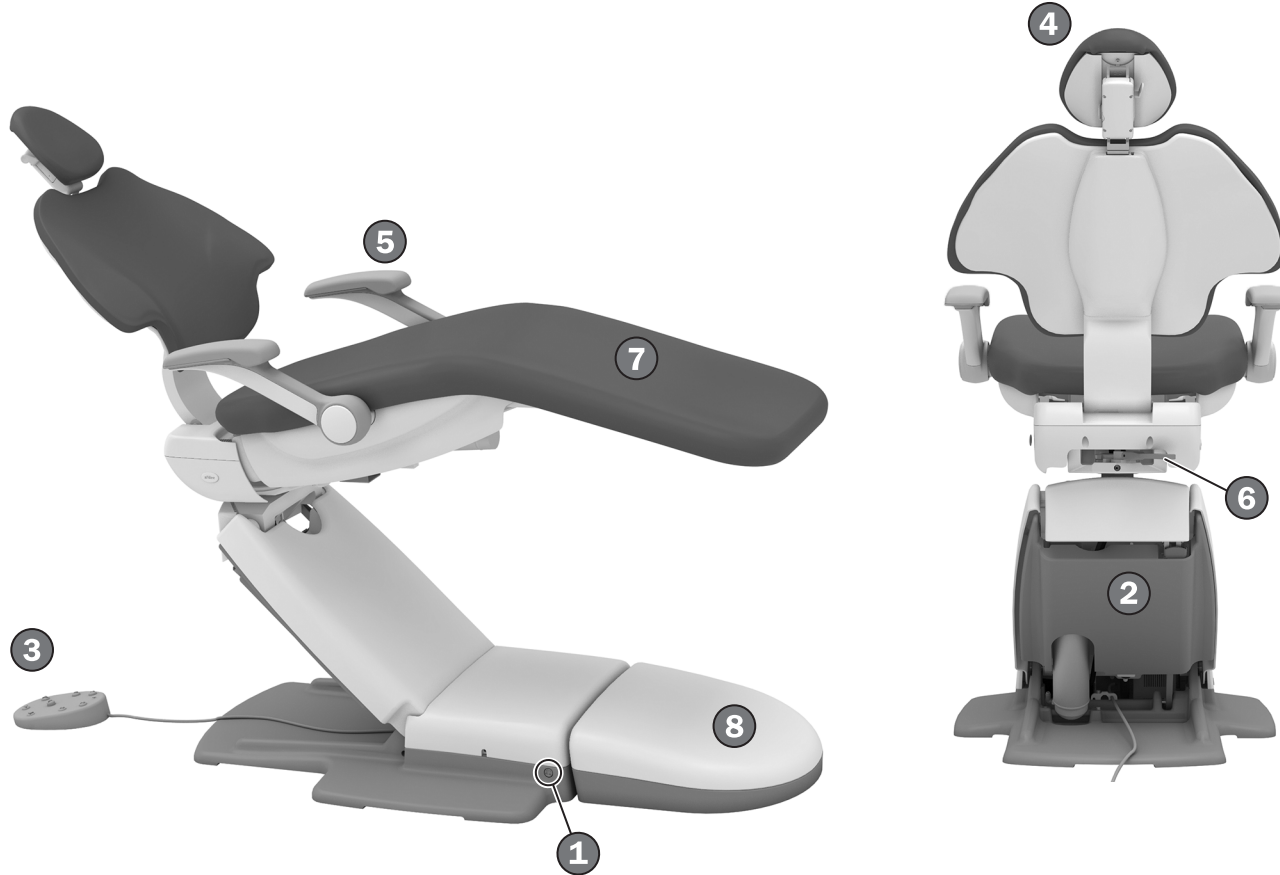

Özellikler/Konular

1	Güç Düğmesi	2
2	Koltuk Durma Plakası	3
3	Ayak Pedalı/Koltuk Kontrolleri	4
4	Tetiyer	7
5	Kolçaklar	6
6	Koltuk Döner Freni	9
7	Döşeme Bakımı	10
8	Tesisat	11
	Teknik Özellikler	12

Çalıştırma/Ayarlama

Gücü Açma ve Kapama



Tablet ve Destek Sistemleri Bulunan Koltuklar

Koltuğunuzda bağlı bir sistem bulunuyorsa; gücü, suyu ve havayı açmak için ana güç anahtarını kullanın. Ana güç anahtarı normalde tablet sistemi üzerinde yer alır, ancak tablet sistemi olmayan koltuklarda destek merkezi veya zemin kutusu üzerinde de bulunabilir.

Sisteme güç gelmiyorsa, koltuk güç düğmesine basıldığını doğrulayın. Ana anahtarın sistem gücünü kontrol edebilmesi için bu düğmenin açık olması gerekmektedir.

Yalnızca Koltuktan Oluşan Konfigürasyonlar

Yalnızca koltuktan oluşan bir konfigürasyona sahipseniz, gücü açmak veya kapamak için koltuktaki güç düğmesine basın.

Güç Ne Zaman Kapatılmalıdır?

Enerji tasarrufu sağlamak ve hava kaçağı olasılığını azaltmak için, günün sonunda ve ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman güç düğmesine basarak gücü kapatın.

Koltuk Güvenlik Özellikleri





A-dec dental koltuklarda ve sistemlerde, koltuğun hareketini durdurabilecek veya engelleyebilecek güvenlik özellikleri (koltuk durdurma plakası gibi) bulunur. Bu özellikler aşağıdakilere bağlı olarak devreye girebilir:

- Koltuğun veya takılı modülün altında bir engellenme olduğunda.
- Ayak kumandası diskine veya koluna basıldığında.
- Bir başlık tutucusuna düzgün olarak oturmadığında.

Koltuk Beklenmedik Şekilde Durursa veya Hareket Etmezse

Yukarıdaki durumların tümünü kontrol edin ve düzeltin. Koltuk hareketini bloke eden bir engelleme varsa, koltuğu yükseltmek için dokunmatik paneli veya ayak pedalını kullanın, ardından engele neden olan nesneyi kaldırın.

Koltuğu Manuel Kontrollerle Konumlandırma

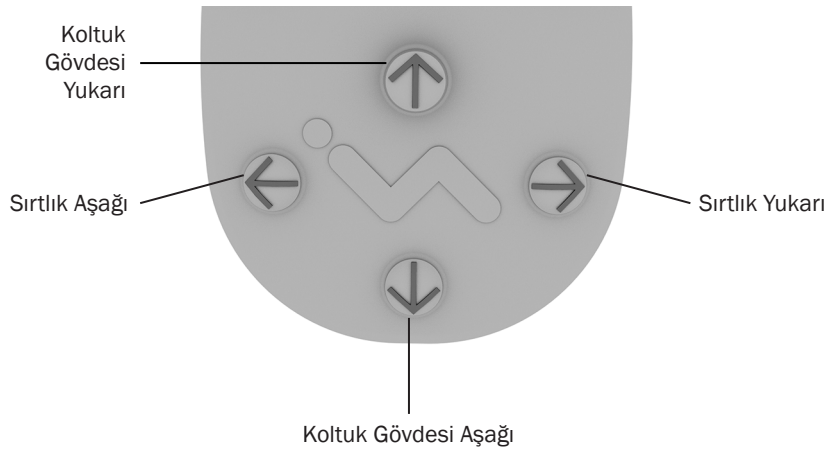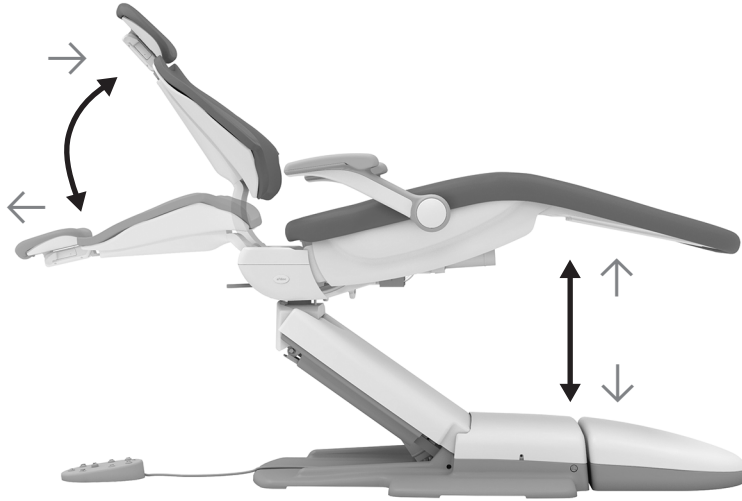

ÖNEMLİ A-dec dokunmatik paneli ve ayak pedalı, koltuk hareketini aynı şekilde kontrol eder. Dokunmatik panel kontrollerinizle ilgili ayrıntılı bilgiler için, tablet sisteminizin Kullanma Talimatlarına bakın.



UYARI Manuel veya ön ayar koltuk kontrollerini kullanmadan önce hastanın güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olun. Koltuk hareket ederken hastayı asla yalnız bırakmayın. Küçük çocuklar ve kısıtlı hareket edebilen hastalar söz konusu olduğunda daima ekstra dikkat gösterin.


Ön ayarlı hareket sırasında koltuğu herhangi bir noktada durdurmak için ayak pedalı veya dokunmatik panel üzerindeki herhangi bir koltuk konumlandırma düğmesine basın.



NOT Koltuğunuzun maksimum yüksekliğini ayarlamak isterseniz yerel yetkili A-dec bayinizle iletişime geçin.

Simge/İşlev	Eylemler/Seçenekler
↑ Koltuk Gövdesi Yukarı	↑ düğmesine basılı tutarak koltuk tabanını yükseltin.
↓ Koltuk Gövdesi Aşağı	↓ düğmesine basılı tutarak koltuk tabanını aşağı indirin.
→ Sırtlık Yukarı	→ düğmesine basılı tutarak koltuk sırtlığını yükseltin.
← Sırtlık Aşağı	← düğmesine basılı tutarak koltuk sırtlığını indirin.

Koltuğu Ön Ayar Kontrolleriyle Konumlandırma

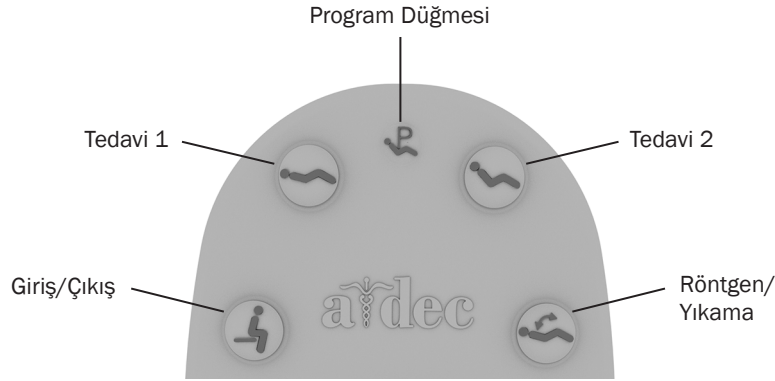

Simge	Ön Ayar Adı	Fabrika Ayarı
	Giriş/Çıkış	Koltuğu hasta girişi/çıkışı için konumlandırır.
	Tedavi 1	Koltuk gövdesini ve sırtlığı aşağı indirir.
	Tedavi 2	Koltuk gövdesini aşağı indirir ve sırtlığı kısmen yukarı kaldırır.
	Röntgen/Yıkama	Koltuğu röntgen ya da yıkama konumuna getirir. İkinci kez basıldığında koltuk bir önceki konumuna döner.

Koltuğu bir ön ayar konumuna getirmek için , , veya düğmelerine basın. Fabrika ayarları için tabloya (sol altta) bakın.

Koltuk Ön Ayar Konumlarını Özelleştirme

Koltuk ön ayarlarını özelleştirmek için , ve :

1. Koltuğu istenen şekilde konumlandırın.
2. Program modunun açık olduğunu belirten tek bir bip sesi duyuncaya kadar düğmesine basılı tutun.
3. Beş saniye içinde söz konusu yeni koltuk konumuna atanmasını istediğiniz koltuk ön ayarı simgesine basın (ör. düğmesine basın). Üç bip sesi, yeni ayarınızın kaydedildiğini belirtir.


Röntgen/Yıkama Koltuk Ön Ayarını Özelleştirme

Fabrika ön ayarı düğmesi, röntgen çekimleri ve kreşuar erişimi için koltuğu ve hastayı dik bir konuma getirir. düğmesine ikinci kez basıldığında koltuk önceki konumuna geri döner.

Ayrıca, düğmesini özelleştirilmiş koltuk ön ayar konumu olarak da ayarlayabilirsiniz. İşlevini değiştirmek için:

1. Üç saniye boyunca ve düğmelerine aynı anda basılı tutun.
 - o Bir bip sesi düğmesinin başka bir özelleştirilebilir koltuk ön ayar düğmesi olarak ayarlandığını belirtir.
 - o Üç bip sesi, düğmesinin röntgen/yıkama fabrika ön ayarı olarak (röntgen/yıkama konumu ile önceki koltuk konumu arasında geçiş) ayarlandığını belirtir.
2. düğmesini başka bir özelleştirilebilir düğme olarak ayarladıktan sonra farklı bir koltuk konumu atamak isterseniz, yukarıdaki “Koltuk Ön Ayar Konumlarını Özelleştirme” bölümünde açıklanan adımları uygulayın.

Koltuğu Hasta için Hazırlayın

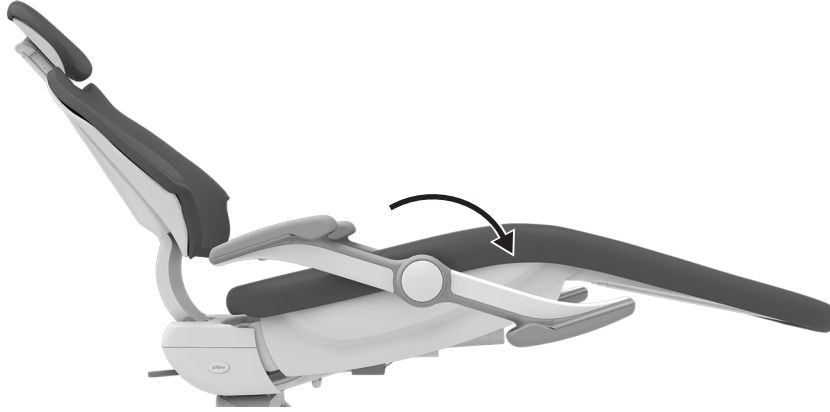

Kolçakları Konumlandırma



UYARI Koltuğu hareket ettirdiğiniz sırada, hastaların kollarını kolçakların arkasına veya sırtlığın altına sarkıtmalarına izin vermeyin, aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

Hastaların oturmasını/kalkmasını kolaylaştırmak ve doğrudan çalışma sırasında operatörün daha iyi erişime sahip olmasını sağlamak için kolçakları kenara çekin. Kolçağı istediğiniz konuma itmeniz veya çekmeniz yeterlidir.

Düzgün Oturma Pozisyonu Sağlayın

Hastaların koltuğa doğru şekilde oturmalarını sağlamak için, hastalardan koltuğun mümkün olduğunca gerisine oturmalarını isteyin. Bu oturma pozisyonu, hastanın bel desteği ile en iyi şekilde hizalanmasını ve rahat etmesini sağlar.

En konforlu oturma pozisyonu için, hastaların ön kollarını kolçaklara koyması veya kollarını kucaklarında rahatça kavuşturmaları gerekir.




TAVSİYE Hasta koltuğa oturmadan önce tetiyeri en yüksek konumda bırakın. Bu yapmanız, hastayı koltuğun en gerisine kadar oturmaya yönlendirir. Hasta oturduktan sonra tetiyeri ayarlayarak hastanın konforunu ve oral kaviteye operatör erişimi artırın.



TAVSİYE Koltuktan kalkarken ek desteğe ihtiyaç duyan hastalar için kolçakları geri pozisyonda bırakın.

Tetiyeri Konumlandırma

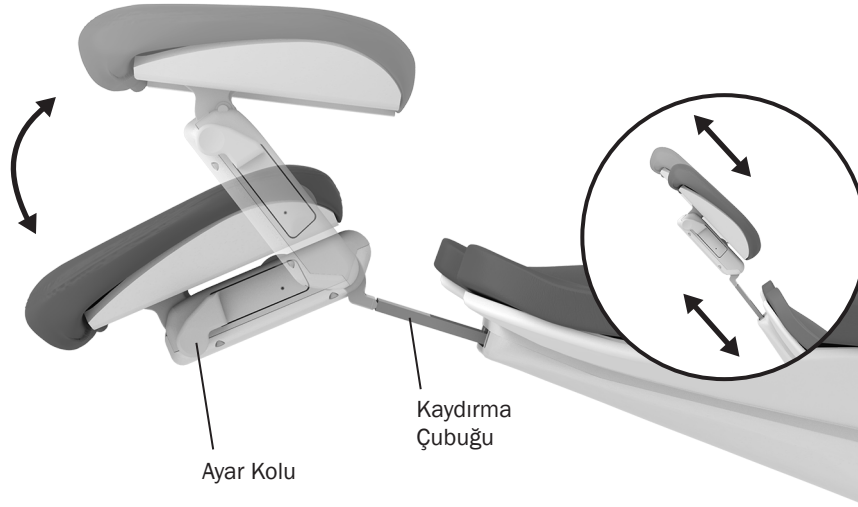

Çift eklemlikli kayan tetiyerde, oral kaviteye erişimi kolaylaştırmak ve hasta konforunu artırmak kullanabileceğiniz çeşitli özellikler bulunur.

Kaydırma çubuğunu kullanarak tetiyeri farklı hasta yüksekliklerine göre ayarlayın. Bunun için tetiyeri istediğiniz konuma gelene kadar yukarı çekmeniz veya aşağı itmeniz yeterlidir. Kayan tetiyer yastığı ilave bir yükseklik ayarlaması yapmanızı sağlar.



UYARI Kaydırma çubuğu tavsiye edilen maksimum çalışma yüksekliğini aştığı zaman, çubuğun hasta tarafında bir uyarı çizgisi görünür. Tetiyeri bu uyarı çizgisinin görülebildiği bir konumda kullanmayın.

Tetiyer açısını tek elinizle kolayca ayarlayabilirsiniz. Tetiyeri konumlandırmak için ayar koluna basın. Serbest bıraktığınızda tetiyer bulunduğu konumda sabit kalır.


Tetiye Tekerlekli Sandalyeler için Konumlandırma



Tetiye tekerlekli sandalyelere göre konumlandırmak için:

1. Tetiye dental koltuktan çıkarın.
2. Tetiye 180° döndürün ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar sırtlığın içine kaydırın.
3. Gerekli olursa dental koltuğu yanlara döndürün ve sırtlığı tam dik konumuna getirin.
4. Tekerlekli sandalyeyi ve dental koltuğu sırt sırta gelecek şekilde konumlandırın.
5. Tetiye yüksekliğini ayarlamak için dental koltuğu gereken şekilde yukarı veya aşağı indirin.
6. Tekerlekli sandalyenin tekerleklerini kilitleyin.


Tetiye Kaydırma Çubuğu Gerilimini Ayarlama

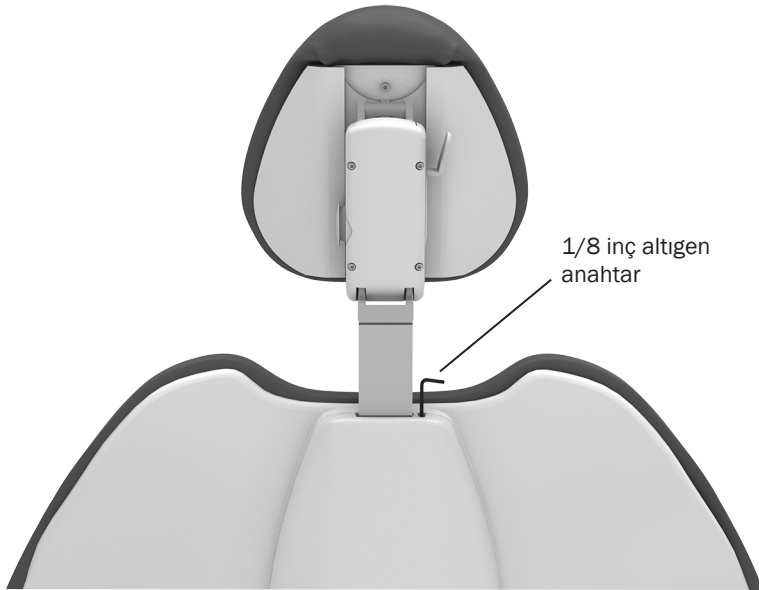

Tetiye aşağı doğru kayıyorsa veya yukarı ya da aşağı zor hareket ediyorsa, kaydırma çubuğu geriliminin ayarlanması gereklidir.

Gerilimi ayarlamak için 1/8 inç altıgen anahtar kullanın. Ayar vidanın saat yönünde çevrilmesi gerilimi artırır.


Koltuk Döner Frenini Kullanma

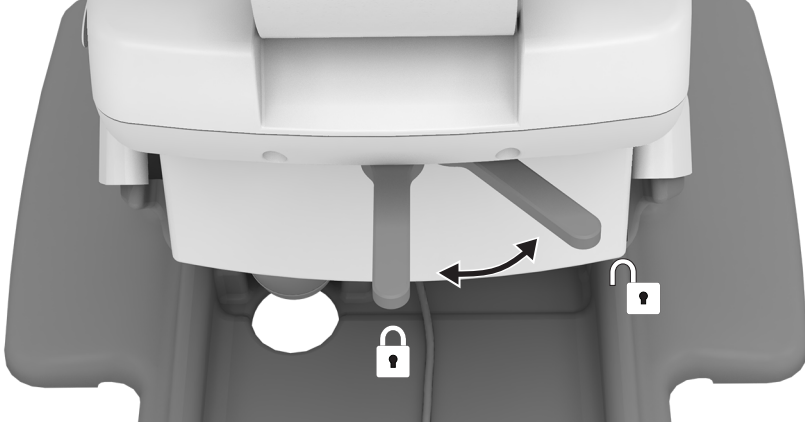

Koltuk, merkezin her iki tarafında 30° içindeki herhangi bir konuma döndürülebilir. Koltuk döner freni, koltuğun bir prosedür sırasında hareket etmesini önlemek için koltuğun dönüşünü sınırlandırır.

Dönüş frenini serbest bırakmak için fren kolunu sağa çekin. Freni etkinleştirmek için fren kolunu sola doğru sağlamca çekin.

Koltuk Döner Freni Gerilimini Ayarlama

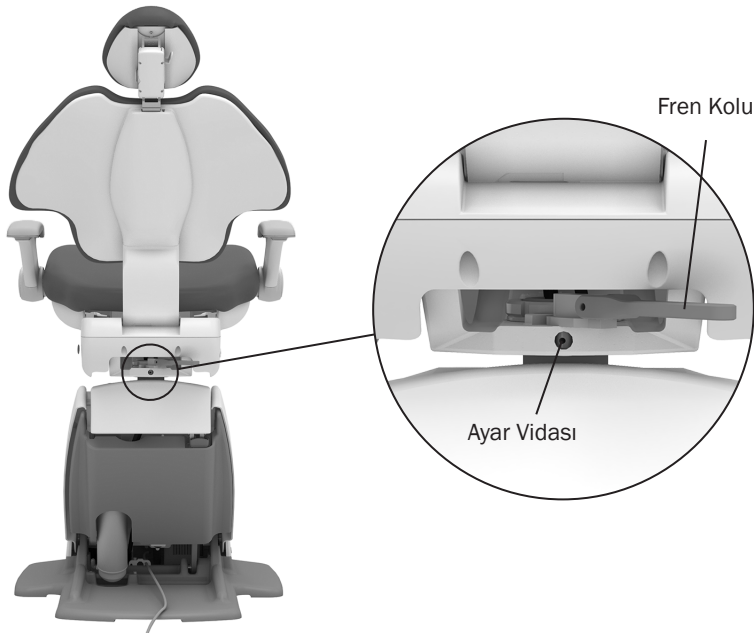


Fren devredeyken koltuk sola veya sağa dönüyorsa ya da fren devreden çıkarıldığında zor hareket ediyorsa dönüş freni gerilimini ayarlayın. Gerilim doğru şekilde ayarlandığında, fren kolu tam olarak etkinleştirildiği zaman ortada durmalıdır. Ayarlamayı yapmak için:

1. Fren kolunu sağa çekin.
2. Koltukta bir koltuk arkası montaj noktası modülü bulunuyorsa, ayar vidasına erişebilmek için koltuğu döndürün.
3. 7/64 inç altıgen anahtar ile gerilim ayar vidasını saat yönüne çevirerek fren sürtünmesini artırın veya saat yönünün tersine çevirerek fren sürtünmesini azaltın. Gerilimi büyük ölçüde artırmak veya azaltmak için küçük bir ayarlama yapmanız yeterlidir.

Temizleme/Bakım

Bariyer Koruması

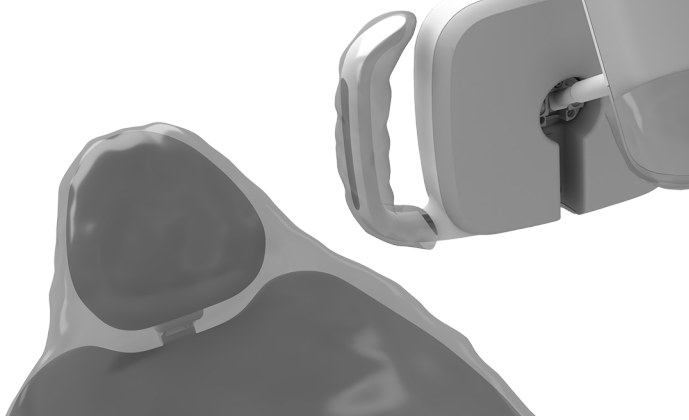

NOT Bariyerlerin düzgün şekilde kullanılması ve atılması için bariyer üreticisi tarafından sağlanan talimatlara bakın.

A-dec, kullanılan tüm temas ve transfer yüzeyleri için bariyer koruması önerir. Temas yüzeyleri elle temas edilen alanlardır ve dental prosedürler sırasında potansiyel çapraz kontaminasyon bölgelerine dönüşürler. Transfer yüzeyleri aletlerle ve canlı olmayan diğer nesnelere temas eden yüzeylerdir.

ABD’de, bariyerler U.S. Food and Drug Administration (USFDA) tarafından belirtilen Güncel İyi Üretim Uygulaması (CGMP) kapsamında üretilmelidir. ABD dışındaki yerler için, bulunduğunuz bölgede geçerli olan tıbbi cihaz düzenlemelerine bakın.



ÖNEMLİ Temas ve transfer yüzeylerini temizleme ve dezenfekte etme hakkındaki öneriler için (bariyer korumasının olmadığı veya bariyerlerin zarar gördüğü durumlarda), lütfen *A-dec Ekipman Asepsi Kılavuzu* (p/n 85.0696.15) belgesine bakın.


Döşemenin Kullanım Ömrünü Uzatma



DİKKAT Döşemeyi temizlemek veya dezenfekte etmek için klor, izopropil alkol (hacimdeki oranı %25'ten fazla olan) ya da hidrojen peroksit içeren ev tipi çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) veya başka ürünleri kullanmayın. Bu maddelerin kullanımı ürünün hızla bozulmasına ve zarar görmesine neden olabilir.

A-dec döşemenizin kalitesini korumak için, kimyasal maddeler kullanmak yerine bariyer örtülerden yararlanın. Bariyerler döşemenin ömrünü önemli ölçüde artırır ve koltuğun lüks görünümünün ve yumuşaklık hissinin korunmasına yardımcı olur. Döşemeyi temizlemek için, yumuşak bir deterjan ve sudan oluşan solüsyon kullanın. Yalnızca bariyerler bozulduğunda veya döşemede görünür bir leke olduğunda yüzey dezenfektanları kullanın. Daha fazla bilgi için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan *Döşeme Bakım Kılavuzu* (p/n 86.0501.15) belgesine başvurun.

Tesisata Erişim

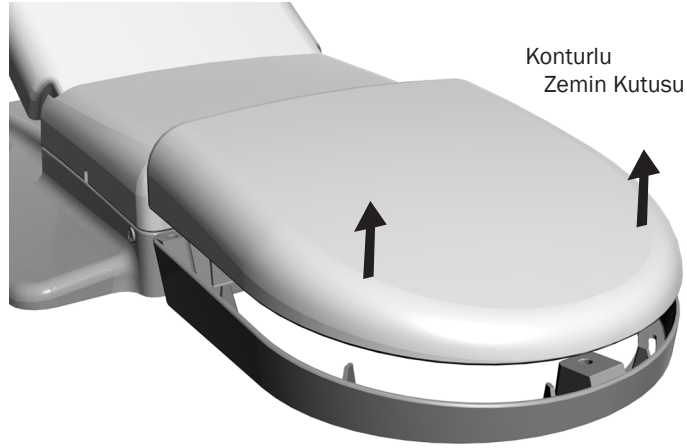

DİKKAT Kapakları çıkarırken veya yerlerine takarken kabloları ya da borulara zarar vermemek için dikkatli olun. Takıldıktan sonra kapakların sağlam olduğunu doğrulayın.

Koltuk tesisatı, koltuğunuzun altındaki konturlu zemin kutusunda bulunur ve genellikle elektrik prizinin yanı sıra hava, su ve vakum için sistem bağlantılarını da içerir. Tesisata erişmek için, kapağı zemin kutusu kasasından kaldırıp çıkarın. Bakım için yerel yetkili A-dec bayiniz ile iletişim kurun.

Teknik Özellikler



Koltuğun Maksimum Kapasitesi

Hasta Yüğü: 227 kg (500 lb)



ÖNEMLİ Koltuk aksesuarı yük kapasitesi, elektrikle ilgili teknik özellikler, sembollerin tanımları ve diğer düzenleyici gereksinimler için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan *Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti* belgesine (p/n 86.0221.15) bakın.



NOT Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Gerekli koşullar bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yetkili A-dec satıcınızla bağlantı kurun.



A-dec Genel Merkezi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Amerika Birleşik Devletleri
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
www.a-dec.com

A-dec Avustralya

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Avustralya
Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61.(0).2.8332.4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Çin
Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec Birleşik Krallık

Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
İngiltere
Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) İngiltere içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 İngiltere dışından



86.0761.15 Rev D
Yayın Tarihi 2023-08-01
Copyright 2023 A-dec Inc.
Tüm hakları saklıdır.