

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

A-dec 511

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ



 a dec®

Copyright

© 2023 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η A-dec Inc. δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα που περιέχονται στο παρόν, ή για οποιοδήποτε συμπτωματικές ή άλλου είδους ζημιές που αφορούν την προμήθεια, απόδοση ή χρήση αυτού του υλικού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στα παρεχόμενα έντυπα, ενημερώστε μας γραπτώς. Η A-dec Inc. δεν εγγυάται ότι αυτό το έγγραφο δεν περιέχει σφάλματα.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φωτοαντιγράφων, της μαγνητοφώνησης ή της χρήσης οποιουδήποτε συστήματος αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την A-dec Inc.

Εμπορικά σήματα και επιπρόσθετα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ονομασία A-dec, το λογότυπο της A-dec και οι ονομασίες A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius και reliablecreativesolutions αποτελούν εμπορικά σήματα της A-dec Inc. και έχουν κατατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 και EasyFlex είναι επίσης εμπορικά σήματα της A-dec Inc. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή οποιαδήποτε μεταχείριση κανενός από τα εμπορικά σήματα ή τις εμπορικές επωνυμίες του παρόντος εγγράφου χωρίς τη ρητή, έγγραφη έγκριση του κατόχου του εμπορικού σήματος.

Ορισμένα σύμβολα και εικονίδια του πληκτρολογίου αφής αποτελούν ιδιοκτησία της A-dec Inc. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση αυτών των συμβόλων και εικονιδίων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της A-dec Inc.

Ρυθμιστικές πληροφορίες και εγγύηση

Για τις απαιτούμενες ρυθμιστικές πληροφορίες και για την εγγύηση της A-dec, βλ. το έγγραφο *Ρυθμιστικές πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση* (A/E 86.0221.12) που είναι διαθέσιμο στο Κέντρο πόρων στη διεύθυνση www.a-dec.com.


Σέρβις προϊόντων

Για σέρβις των προϊόντων, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec στην περιοχή σας. Για να εντοπίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σέρβις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.a-dec.com ή επικοινωνήστε με την A-dec στον αριθμό 1.800.547.1883 για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ή στον αριθμό 1.503.538.7478 διεθνώς.

Μοντέλα και εκδόσεις προϊόντων που καλύπτονται στο παρόν έγγραφο

Μοντέλο	Έκδοση	Περιγραφή
511	B	Οδοντιατρική έδρα

Χάρτης περιεχομένου

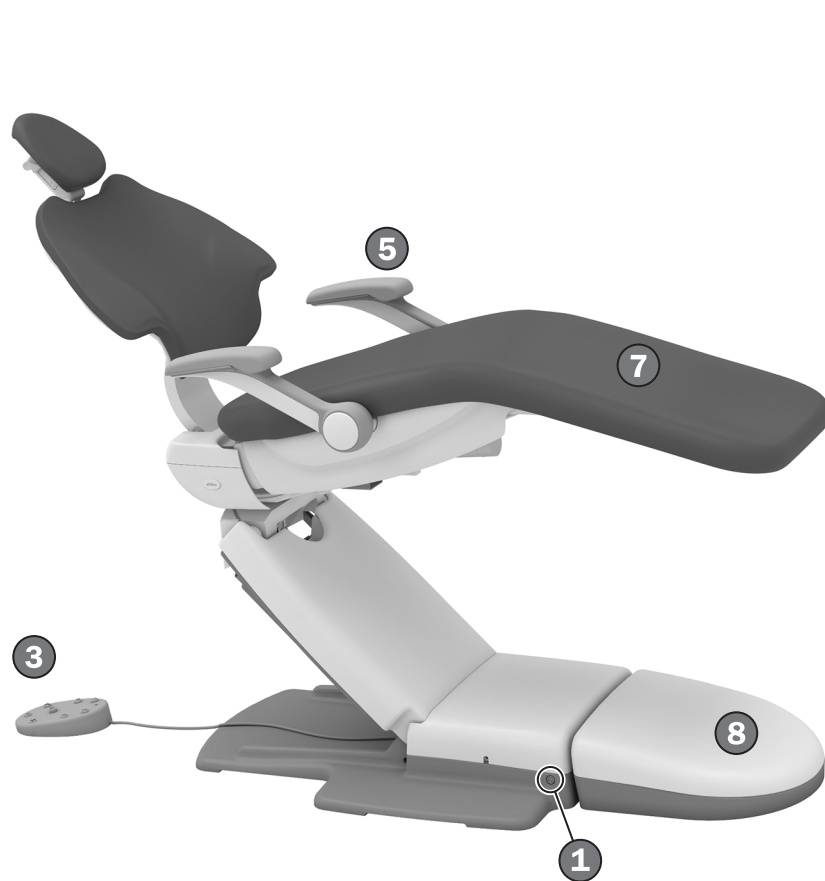

Λειτουργίες/Θέματα

1	Κουμπί λειτουργίας	2
2	Πλάκα ανασταλτικού μηχανισμού έδρας	3
3	Κουμπιά ελέγχου πεντάλ/έδρας	4
4	Προσκέφαλο	7
5	Μπράτσα	6
6	Φρένο στροφέα έδρας	9
7	Φροντίδα ταπετσαρίας	10
8	Παροχές αέρα/νερού	11
	Προδιαγραφές	12

Λειτουργία/Ρύθμιση

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας



Έδρες με συστήματα παροχής και υποστήριξης

Αν υπάρχει συνδεδεμένο σύστημα στην έδρα σας, χρησιμοποιήστε τον κύριο διακόπτη εναλλαγής για την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, του νερού και του αέρα. Ο κύριος διακόπτης εναλλαγής βρίσκεται κανονικά πάνω στο σύστημα παροχής, αλλά ενδέχεται να βρίσκεται στο κέντρο υποστήριξης ή στο κουτί δαπέδου για τα μοντέλα εδρών που δεν διαθέτουν σύστημα παροχής.

Εάν δεν υπάρχει ισχύς στο σύστημα, επαληθεύστε ότι το κουμπί λειτουργίας της έδρας είναι πατημένο. Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της τροφοδοσίας του συστήματος από τον κύριο διακόπτη εναλλαγής, το κουμπί αυτό πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.

Διαμορφώσεις για έδρα μόνο

Εάν έχετε μια διαμόρφωση για έδρα μόνο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην έδρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Πότε πρέπει να απενεργοποιείται η λειτουργία

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να μειώσετε την πιθανότητα διαρροής αέρα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία στο τέλος της ημέρας και πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας έδρας





Οι οδοντιατρικές έδρες και τα συστήματα A-dec περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά ασφαλείας (όπως η πλάκα ανασταλτικού μηχανισμού έδρας), που μπορεί να διακόψουν ή να εμποδίσουν την κίνηση της έδρας. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

- Υπάρχει εμπόδιο κάτω από την έδρα και τη συνδεδεμένη μονάδα.
- Έχει πατηθεί ένας δίσκος ποδοδιακόπτη ή μοχλός.
- Ένα εργαλείο χειρός δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του.

Αν η έδρα σταματήσει απρόσμενα ή δεν κινείται

Ελέγξτε και διορθώστε οποιαδήποτε από τις συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω. Εάν κάποιο εμπόδιο εμποδίζει την κίνηση της έδρας, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο αφής ή το πεντάλ για να σηκώσετε την έδρα και, στη συνέχεια, απομακρύνετε το εμπόδιο.

Θέση της έδρας με κουμπιά χειροκίνητου ελέγχου

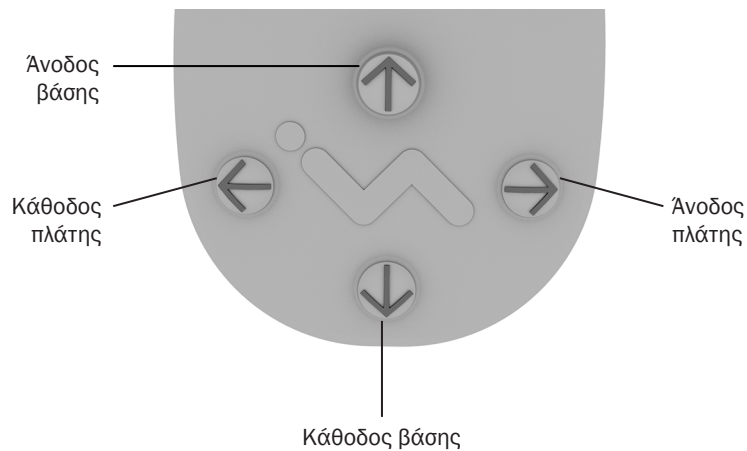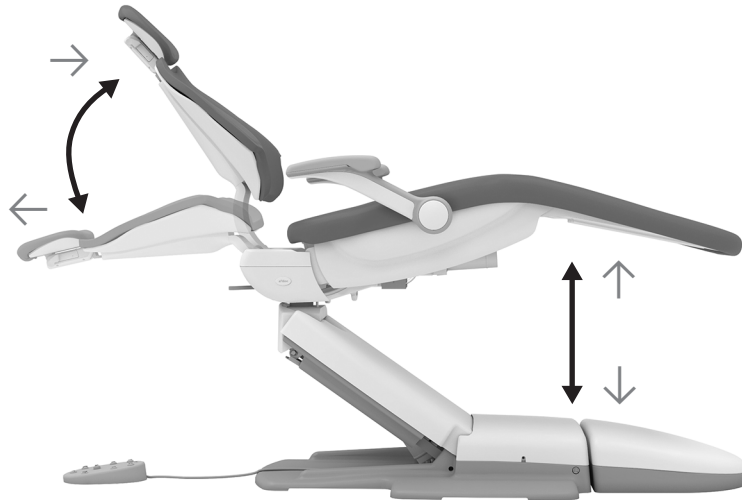

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το πληκτρολόγιο αφής και το πεντάλ A-dec μετακινούν την έδρα με τον ίδιο τρόπο. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του συστήματος παροχής για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χειριστήρια του πληκτρολογίου αφής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει καθίσει με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τα χειροκίνητα ή προρυθμισμένα χειριστήρια της έδρας. Μην αφήνετε ποτέ τον ασθενή ανεπιτήρητο όσο η έδρα κινείται. Όταν πρόκειται για μικρά παιδιά και για ασθενείς μειωμένης κινητικότητας, απαιτείται πάντοτε μεγαλύτερη προσοχή.


Για να σταματήσετε την έδρα σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια προρυθμισμένης κίνησης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπιό ρύθμισης θέσης της έδρας στο πεντάλ ή στο πληκτρολόγιο αφής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το μέγιστο ύψος της έδρας σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec.

Εικονίδιο/Λειτουργία	Ενέργειες/Επιλογές
↑ Άνοδος βάσης	Πατήστε παρατεταμένα το ↑ για να ανυψώσετε τη βάση έδρας.
↓ Κάθοδος βάσης	Πατήστε παρατεταμένα το ↓ για να χαμηλώσετε εντελώς τη βάση έδρας.
→ Άνοδος πλάτης	Πατήστε παρατεταμένα το → για να ανυψώσετε την πλάτη έδρας.
← Κάθοδος πλάτης	Πατήστε παρατεταμένα το ← για να χαμηλώσετε την πλάτη έδρας.

Θέση της έδρας με προρυθμισμένα κουμπιά ελέγχου

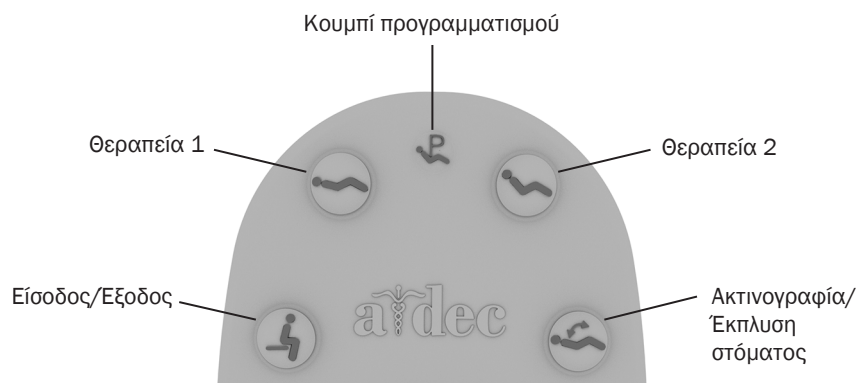

Εικονίδιο	Όνομα προρρύθμισης	Εργοστασιακή ρύθμιση
	Είσοδος/Εξόδος	Τοποθέτηση της έδρας σε θέση εισόδου/εξόδου του ασθενούς.
	Θεραπεία 1	Τοποθέτηση της βάσης και της πλάτης της έδρας κάτω.
	Θεραπεία 2	Τοποθέτηση της βάσης της έδρας κάτω και της πλάτης μερικώς πάνω.
	Ακτινογραφία/ Έκπλυση στόματος	Μετακίνηση της έδρας σε θέση για ακτινογραφία ή έκπλυση στόματος. Αν το πιάσετε δεύτερη φορά, η έδρα επανέρχεται στην προηγούμενη θέση.

Πατήστε , , ή για να μετακινήσετε την έδρα σε μια προρυθμισμένη θέση. Βλ. τον πίνακα (κάτω αριστερά) για τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προσαρμογή των προρυθμισμένων θέσεων της έδρας

Για να προσαρμόσετε τις προρυθμίσεις της έδρας , και :

1. Τοποθετήστε την έδρα όπως επιθυμείτε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προγράμματος.
3. Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, πατήστε το εικονίδιο προρρύθμισης έδρας που θέλετε να αντιστοιχιστεί σε αυτήν τη νέα θέση έδρας (π.χ. πατήστε). Τρεις χαρακτηριστικοί ήχοι υποδεικνύουν ότι η νέα ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.


Προσαρμογή της προρρύθμισης έδρας ακτινογραφίας/ έκπλυσης στόματος

Η εργοστασιακή προρρύθμιση μετακινεί την έδρα και τον ασθενή σε όρθια θέση για ακτινογραφία ή για πρόσβαση στο πτυελοδοχείο. Αν πιάσετε το δεύτερη φορά, η έδρα επανέρχεται στην προηγούμενη θέση.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το να λειτουργεί ως προσαρμοσμένη προρρυθμισμένη θέση έδρας. Για να αλλάξετε τη λειτουργία του:

1. Πατήστε το και το ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα.
 - Ένας χαρακτηριστικός ήχος υποδεικνύει ότι το έχει ρυθμιστεί ως άλλο προσαρμόσιμο κουμπί προρρύθμισης έδρας.
 - Τρεις χαρακτηριστικοί ήχοι επιβεβαιώνουν ότι το έχει οριστεί ως η εργοστασιακή προρρύθμιση για ακτινογραφία/ έκπλυση στόματος (αλλάζει μεταξύ της θέσης ακτινογραφίας/ έκπλυσης στόματος και της προηγούμενης θέσης της έδρας).
2. Εάν ορίσετε το ως άλλη προσαρμόσιμη προρρύθμιση έδρας και θέλετε να αντιστοιχίσετε μια διαφορετική θέση έδρας, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα "Προσαρμογή των προρυθμισμένων θέσεων της έδρας".

Προετοιμασία της έδρας για τον ασθενή

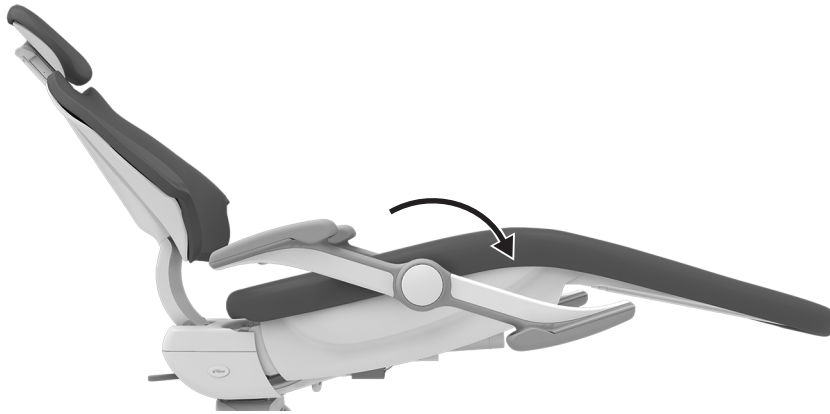

Θέση των μπράτσων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τους ασθενείς να τοποθετούν τα χέρια τους πίσω από τα μπράτσα ή κάτω από το υποστήριγμα πλάτης, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός κατά τη μετακίνηση της έδρας.

Μετακινήστε το μπράτσο, ώστε ο ασθενής να μπορεί να κάθεται και να σηκώνεται ευκολότερα από την έδρα και ο χειριστής να έχει καλύτερη πρόσβαση κατά την απ' ευθείας εργασία. Απλά πιέστε ή τραβήξτε το μπράτσο στη θέση του.

Σωστή καθιστή θέση

Για τη σωστή τοποθέτηση των ασθενών στην έδρα, ζητήστε τους να καθίσουν όσο το δυνατόν πιο πίσω στο κάθισμα. Αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη ευθυγράμμιση με το στήριγμα σπονδυλικής στήλης και άνεση για τον ασθενή.

Για μέγιστη άνεση, οι ασθενείς μπορούν να τοποθετούν τα χέρια τους στα μπράτσα της έδρας ή να τα κρατούν σταυρωμένα μπροστά τους.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ Πριν καθίσει ο ασθενής στην έδρα, αφήστε το προσκέφαλο σε ψηλότερη θέση. Αυτό θα ενθαρρύνει τον ασθενή να καθίσει εντελώς πίσω στην έδρα. Ρυθμίστε το προσκέφαλο μόλις ο ασθενής καθίσει, για να βελτιώσετε την άνεση του ασθενή και την πρόσβαση του χειριστή στη στοματική κοιλότητα.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ Για ασθενείς που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για να σηκωθούν από την έδρα, αφήστε τα μπράτσα στην πίσω θέση.

Θέση του προσκέφαλου

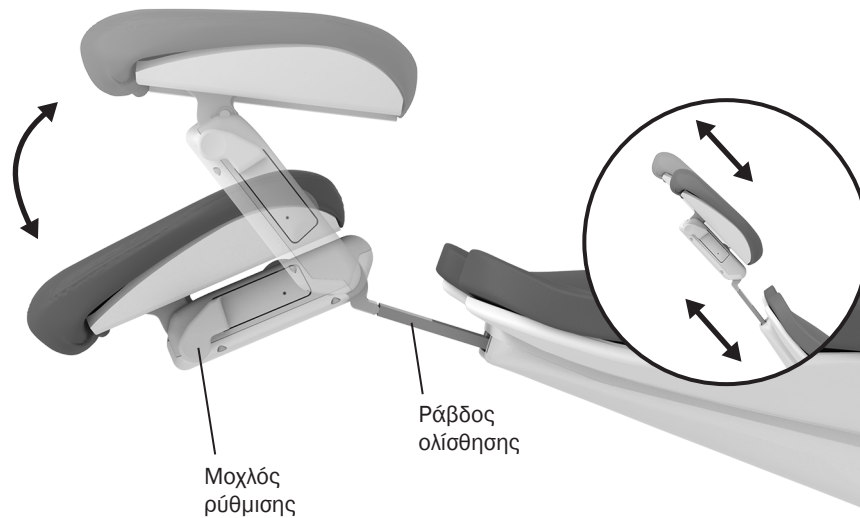

Το συρόμενο προσκέφαλο με διπλή άρθρωση διαθέτει πολλές δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να βελτιώσετε την πρόσβαση στη στοματική κοιλότητα και να αυξήσετε την άνεση του ασθενούς.

Χρησιμοποιήστε τη ράβδο ολίσθησης για ρύθμιση ανάλογα με το ύψος του ασθενούς. Τραβήξτε προς τα πάνω ή σπρώξτε προς τα κάτω το προσκέφαλο για να το τοποθετήσετε στην επιθυμητή θέση. Το συρόμενο μαξιλαράκι του προσκέφαλου παρέχει πρόσθετη ρύθμιση του ύψους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν η ράβδος ολίσθησης έχει υπερβεί το μέγιστο συνιστώμενο ύψος λειτουργίας, θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική ένδειξη στη ράβδο ολίσθησης στην πλευρά του ασθενούς. Μην χρησιμοποιείτε το προσκέφαλο σε οποιαδήποτε θέση στην οποία είναι ορατή αυτή η προειδοποιητική ένδειξη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τη γωνία του προσκέφαλου με το ένα χέρι. Πιέστε τον μοχλό ρύθμισης για να τοποθετήσετε το προσκέφαλο στην επιθυμητή θέση. Απελευθερώστε τον μοχλό και το προσκέφαλο διατηρείται στη θέση του.


Τοποθέτηση του προσκέφαλου για χρήση από άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια



Για την τοποθέτηση του προσκέφαλου για χρήση από άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια:

1. Αφαιρέστε το προσκέφαλο από την οδοντιατρική έδρα.
2. Περιστρέψτε το προσκέφαλο κατά 180° και σπρώξτε τη ράβδο ολίσθησης μέσα στο υποστήριγμα πλάτης μέχρι να σταματήσει.
3. Περιστρέψτε την οδοντιατρική έδρα αν χρειάζεται και τοποθετήστε το υποστήριγμα πλάτης στην πλήρως ανυψωμένη θέση.
4. Τοποθετήστε το αναπηρικό αμαξίδιο και την οδοντιατρική έδρα πλάτη με πλάτη.
5. Μετακινήστε την οδοντιατρική έδρα επάνω ή κάτω, όπως είναι απαραίτητο, για να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου.
6. Κλειδώστε τους τροχούς του αναπηρικού αμαξιδίου.


Ρύθμιση της αντίστασης ράβδου ολίσθησης προσκέφαλου

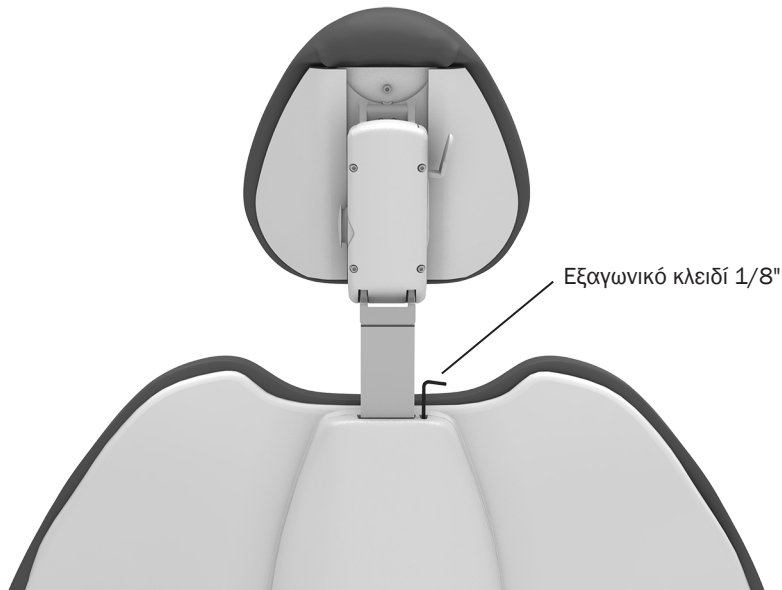

Αν το προσκέφαλο μετατοπιστεί προς τα κάτω ή αν είναι δύσκολο να μετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τότε πρέπει να ρυθμιστεί η αντίσταση της ράβδου ολίσθησης.

Για τη ρύθμιση της αντίστασης, χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 1/8". Περιστρέψτε τη ρυθμιζόμενη βίδα δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση.


Χειρισμός του φρένου στροφέα έδρας

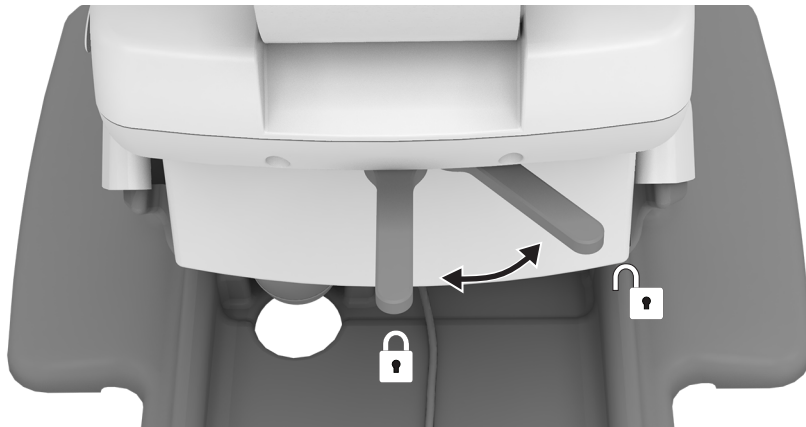

Η έδρα μπορεί να περιστραφεί σε οποιαδήποτε θέση, εντός μιας ακτίνας 30° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση από το κέντρο. Το φρένο στροφέα της έδρας περιορίζει την περιστροφή της, ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση της έδρας κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας.

Για την απεμπλοκή του φρένου στροφέα, τραβήξτε τον μοχλό του φρένου προς τα δεξιά. Για την εμπλοκή του φρένου, τραβήξτε σταθερά τον μοχλό του φρένου προς τα αριστερά.

Ρύθμιση αντίστασης φρένου στροφέα έδρας

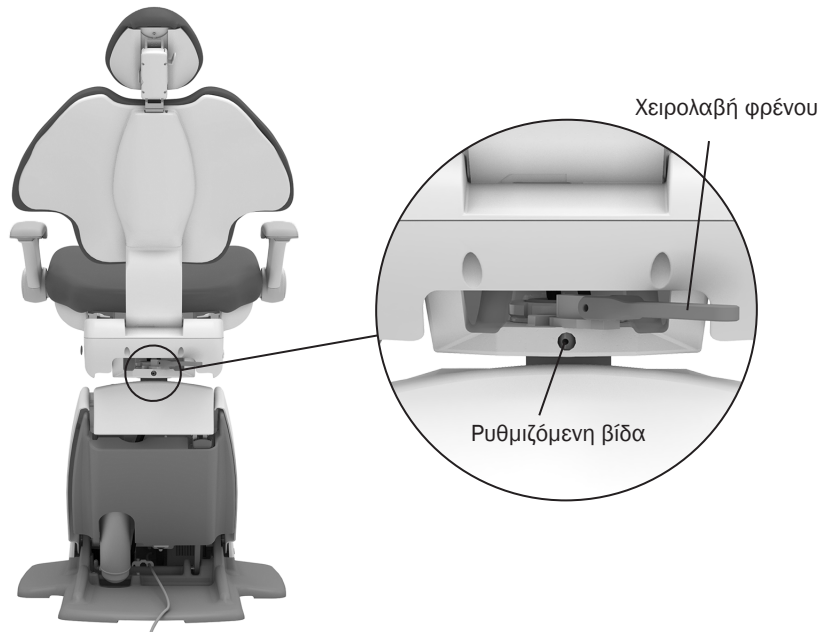


Αν η έδρα περιστρέφεται αριστερά ή δεξιά με το φρένο σε εμπλοκή ή αν είναι δύσκολο να μετακινηθεί με το φρένο σε απεμπλοκή, ρυθμίστε την αντίσταση του φρένου στροφέα. Για τη σωστή αντίσταση, η χειρολαβή του φρένου θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο, όταν το φρένο είναι σε πλήρη εμπλοκή. Για τη ρύθμιση:

1. Μετακινήστε τη χειρολαβή του φρένου προς τα δεξιά.
2. Εάν η έδρα διαθέτει εξάρτημα προσαρμογής πλάτης, περιστρέψτε την έδρα ώστε να έχετε πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη βίδα.
3. Χρησιμοποιώντας ένα εξαγωνικό κλειδί 7/64", στρέψτε τη ρυθμιζόμενη βίδα αντίστασης δεξιόστροφα για να αυξήσετε την τριβή του φρένου ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την τριβή του φρένου. Μια μικρή ρύθμιση αρκεί για να αυξηθεί ή να μειωθεί σημαντικά η αντίσταση.

Καθαρισμός/Συντήρηση

Προστασία με προστατευτικές μεμβράνες

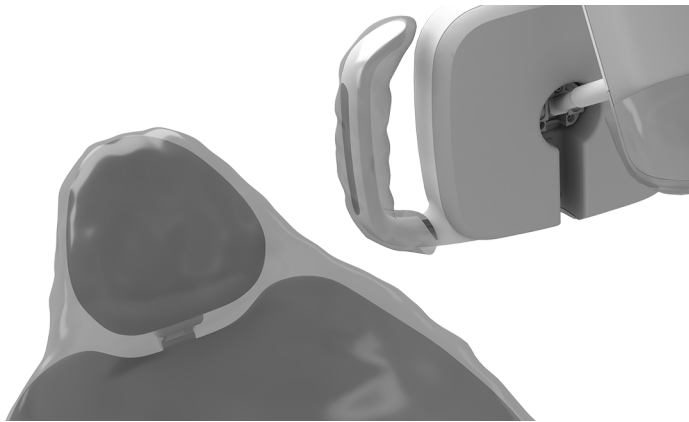

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την κατάλληλη χρήση και την απόρριψη των προστατευτικών καλυμμάτων, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών καλυμμάτων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για συστάσεις σχετικά με τον καθαρισμό και τη χημική απολύμανση των επιφανειών αφής και μεταφοράς (όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προστατευτικές μεμβράνες ή όταν οι προστατευτικές μεμβράνες έχουν φθαρεί), ανατρέξτε στο έγγραφο *Οδηγός ασηψίας εξοπλισμού της A-dec* (A/E 85.0696.12).


Παράταση της διάρκειας ζωής της ταπετσαρίας



ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε κοινή χλωρίνη του εμπορίου (υποχλωριώδες νάτριο) ή άλλα προϊόντα που περιέχουν χλώριο, ισοπροπυλική αλκοόλη (άνω του 25% κατ' όγκο) ή σταθεροποιημένο υπεροξειδίο του υδρογόνου, για τον καθαρισμό ή την απολύμανση της ταπετσαρίας. Οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν ταχεία φθορά και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Για να διατηρήσετε την ποιότητα της ταπετσαρίας της έδρας A-dec, χρησιμοποιείτε προστατευτικά καλύμματα αντί για χημικά καθαριστικά. Τα προστατευτικά καλύμματα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της ταπετσαρίας και συμβάλλουν στη διατήρηση της πολυτελούς της εμφάνισης και της απαλής της αίσθησης. Για τον καθαρισμό της ταπετσαρίας, χρησιμοποιείτε ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού πιάτων με νερό. Χρησιμοποιείτε απολυμαντικά επιφανειών μόνο σε περίπτωση που διακυβευτεί η ακεραιότητα των προστατευτικών καλυμμάτων ή υπάρχουν ορατές πιτσιλιές πάνω στην ταπετσαρία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον *Οδηγό συντήρησης ταπετσαρίας* (A/E 86.0501.12), που διατίθεται στο Κέντρο πόρων στη διεύθυνση www.a-dec.com.

Πρόσβαση στις παροχές αέρα/νερού

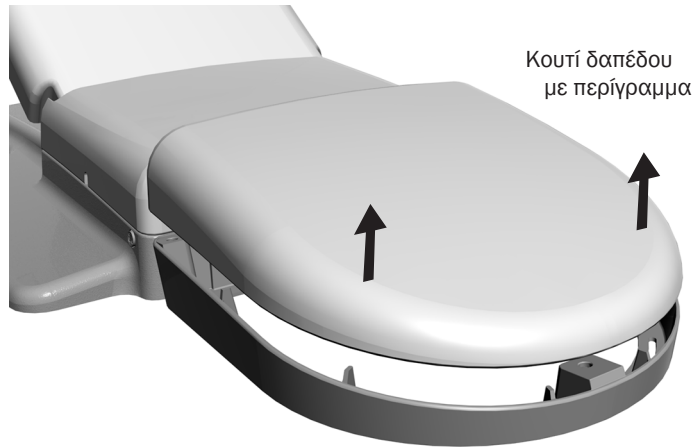

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την αφαίρεση ή την αντικατάσταση των καλυμμάτων, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά σε τυχόν καλωδίωση ή σωλήνωση. Επαληθεύστε ότι τα καλύμματα έχουν ασφαλίσει καλά μετά την επανατοποθέτησή τους.

Οι παροχές αέρα/νερού της έδρας βρίσκονται στο κουτί δαπέδου με περίγραμμα κάτω από την έδρα σας και συνήθως περιλαμβάνουν την πρίζα, καθώς και τις συνδέσεις συστήματος για το σύστημα αέρα, το σύστημα νερού και το σύστημα αναρρόφησης. Για πρόσβαση, ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το πλαίσιο του κουτιού δαπέδου. Για τη συντήρηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec.

Προδιαγραφές



Μέγιστη αντοχή βάρους έδρας

Βάρος ασθενούς: 227 kg (500 λίβρες)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη φέρουσα ικανότητα βοηθητικού εξοπλισμού της έδρας, τις ηλεκτρικές προδιαγραφές, την αναγνώριση των συμβόλων και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, ανατρέξτε στο έγγραφο *Κανονιστικές πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση* (A/E 86.0221.12), που είναι διαθέσιμο στο Κέντρο πόρων, στη διεύθυνση www.a-dec.com.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec.



Κεντρικά γραφεία της A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Ηνωμένες Πολιτείες
Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: +1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά
www.a-dec.com

A-dec Αυστραλίας

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Αυστραλία
Τηλ: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας
Τηλ: +61.(0).2.8332.4000 εκτός Αυστραλίας

A-dec Κίνας

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Κίνα
Τηλ: 400.600.5434 εντός Κίνας
Τηλ: +86.571.89026088 εκτός Κίνας

A-dec Ηνωμένου Βασιλείου

Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Αγγλία
Τηλ: 0800.ADEC.UK (2332.85) εντός Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ: +44.(0).24.7635.0901 εκτός Ηνωμένου Βασιλείου



86.0761.12 Rev D
Ημερομηνία έκδοσης 2023-08-01
Copyright 2023 A-dec Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
IFUcov7